



SUPERMASK®

PROTECTIVE EYE MASK FOR HORSES

MASQUE OCULAIRE PROTECTEUR POUR CHEVAUX
MASCARA DE PROTECCION OCULAR PARA CABALLOS

NEW!



Money Saving Coupon
for **REPEL-X**
INSECTICIDE & REPELLENT Inside

SUPERMASK®

MINIATURE HORSE FLY MASK

MASQUE ANTI-MOUCHES POUR CHEVAUX /
MASCARA CONTRA LAS MOSCAS PARA CABALLOS



Official Fly Mask
of the AMHR

**MINIATURE
HORSE**

Stays On The Horse • Comfortable Fit • Keeps Flies Off
Reste fixé au cheval miniature • Confortable • Éloigne les mouches
Se queda fija en el caballo miniatura • Es cómoda • Aleja las moscas

CONTENTS: ONE SUPERMASK • CONTIENT : UN SUPERMASK • CONTENIDO: UNA MÁSCARA SUPERMASK


Other FARNAM products
available for miniature horses

PLATFORM®

Miniature Horse & Pony Feed

Specially formulated for smaller,
more efficient digestive systems of
miniature horses and ponies.

Visit platformfeed.com for more information!

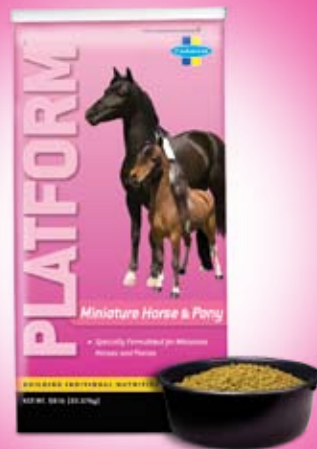

- Keeps flies away from eyes without obstructing vision
- Protects eyes from flying dust, dirt and debris
- Aids healing after eye injuries
- Use as a sunscreen to protect eyes and face
- No rubbing or harsh abrasion
- Often lasts more than one season
- Fleece-lined ear opening and nose band conform snugly to keep flies out

LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMER:
Buyer assumes all risks of use, storage and handling of this material not in strict accordance with label directions and usage. In no event shall Seller's liability exceed the purchase price of this product.

- Éloigne les mouches des yeux sans gêner la vision
- Protège les yeux contre les débris, la saleté et la poussière volant dans l'air
- Aide à la guérison des blessures oculaires
- S'utilise comme écran solaire pour protéger les yeux et la tête
- Pas de frottement ou d'abrasion sévère
- Dure souvent plus d'une saison
- Capote et entrée du conduit auriculaire, molletonnées et bien ajustées pour éloigner les mouches

GARANTIE LIMITÉE ET RESPONSABILITÉ:
L'acheteur assume tous les risques liés à l'utilisation, au stockage et à la manipulation de ce matériel ne respectant pas rigoureusement les consignes d'utilisation et directives données sur l'étiquette. En aucun cas la responsabilité du vendeur n'excédera le prix d'achat de ce produit.

- Aleja las moscas de los ojos sin obstruir la visión
- Protege los ojos contra el polvo flotante en el aire, suciedad y fragmentos
- Ayuda a curar lesiones oculares
- Se usa como un filtro solar para proteger los ojos y la cara
- No causa rozamiento ni abrasión
- A menudo dura más de una temporada
- Los orificios para las orejas y la muserola forrada en flanela se amoldan bien para evitar que penetren las moscas

GARANTÍA LIMITADA Y LÍMITE DE RESPONSABILIDAD:
El comprador asume todos los riesgos de uso, almacenamiento y manipulación de este material si no se cumplen estrictamente las instrucciones y uso que se indican en la etiqueta. Bajo ninguna circunstancia la responsabilidad del vendedor excederá el precio de compra de este producto.

It's Fly-Proof!

Protects eyes from:

- Fly irritation
- Flying dust, dirt, debris

À l'abri des mouches!

Protège les yeux contre :

- L'irritation par les mouches
- Les débris, la saleté et les poussières dans l'air

¡Es a prueba de moscas!

Protege los ojos contra:

- Irritación causad por moscas
- Polvo flotante en el aire, suciedad y fragmentos

Call with comments or questions:
800-234-2269

Pour toute question ou commentaire,
contactez-nous au :
800-234-2269

Llame con comentarios o preguntas al:
800-234-2269

www.farnamhorse.com

©2007 Farnam Companies, Inc.
Product Code: 3006204 07-0820
Made in China
Fabriqué en Chine
Hecho en China

FARNAM HORSE PRODUCTS
A DIVISION OF FARNAM COMPANIES, INC.
P.O. BOX 34820, PHOENIX, AZ 85067-4820 USA






SUPERMASK[®]



MINIATURE HORSE FLY MASK

MASQUE ANTI-MOUCHS POUR CHEVAL MINIATURE MÁSCARA CONTRA LAS MOSCAS PARA CABALLO MINIATURA

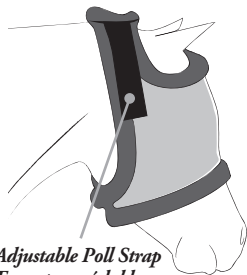

Adjustable Poll Strap
Fermeture réglable
Correa de nuca ajustable

It really stays on the miniature horse! Plus, break-away throatlatch releases with pressure for the miniature horse's safety.

Parfaitement adapté aux chevaux miniatures ! Avec sous-gorge qui se détache par simple pression pour la sécurité des chevaux miniatures.

Realmente permanece en el caballo miniatura. Además, el seguro abatible de garganta se libera con la presión para seguridad del caballo miniatura.



Directions for Use: Start by opening hook and loop closure at throatlatch and at poll (behind ears). Gently place mask around miniature horse's face and attach hook and loop closure behind ears adjusting as required to fit face of miniature horse. Attach hook and loop strap under throatlatch and adjust as necessary to fit miniature horse. If there is excess loop (the upper strap) at throatlatch or poll area, please trim upper loop strip. Ensure fly mask is properly adjusted to fit miniature horse and is not too snug or too loose.

NOTE: When removing, undo the throatlatch gently. The ripping sound might startle your miniature horse and make him jump.

For Best Results:

- Remove mask nightly and check miniature horse's face and eye condition.
- Rinse mask weekly.
- Check fur trim periodically for trapped burrs or irritating foreign objects.

Utilisation : Commencez par ouvrir le crochet et la fermeture à la sous-gorge et à la nuque (derrière les oreilles). Installez délicatement le masque autour de la tête du cheval miniature et attachez le crochet et la fermeture derrière les oreilles en l'ajustant à la tête. Attachez le crochet et la bride sous la sous-gorge et ajustez. Si la boucle est trop large (bride supérieure) au niveau de la sous-gorge ou de la nuque, réglez la bande de la boucle supérieure. Ajustez correctement le masque anti-mouches pour qu'il ne soit ni trop serré, ni trop lâche.

NOTE : Pour retirer le masque, détachez délicatement la sous-gorge. Le bruit peut surprendre votre cheval miniature et le faire sauter.

Pour les meilleurs résultats :

- Retirez le masque le soir et vérifiez les yeux et la tête de votre cheval miniature.
- Rincez le masque une fois par semaine.
- Vérifiez de temps en temps pour retirer les boules de poils ou les corps étrangers qui risquent d'irriter.

Instrucciones: Comience por abrir el gancho y el cierre de lazo en el seguro de garganta y en la nuca (detrás de las orejas). Coloque suavemente la máscara alrededor de la cara del caballo miniatura y empalme el gancho y el cierre de lazo detrás de las orejas ajustando si fuere necesario para adaptarla a la cara del caballo miniatura. Empalme el gancho y el cierre de lazo debajo del seguro de garganta y ajuste si fuere necesario para adaptarlo al caballo miniatura. Si hay un exceso de lazo (la correa superior) en el cierre de garganta o el área de la nuca, reduzca la tira de lazo superior. Cerciórese de que la máscara contra las moscas esté adecuadamente ajustada al caballo miniatura y que no esté demasiado ajustada o suelta.

NOTA: Al retirarla, suelte suavemente el seguro de garganta. El sonido de desgarro puede asustar a su caballo miniatura y hacerlo saltar.

Para mejores resultados:

- Retire la máscara por la noche y verifique la cara y la condición de los ojos de su caballo.
- Enjuague la máscara semanalmente.
- Verifique periódicamente el borde de piel en busca de impurezas atrapadas u objetos extraños irritantes.